

*Quality in its
purest form*



*gymna.***GO**

gymna[®]

Tables de massage

Gymna

Plus d'un demi-siècle de qualité

Depuis sa création il y a plus d'un demi-siècle, Gymna conçoit des tables de massage en tenant compte des besoins des kinésithérapeutes. Notre expérience, combinée à celle de thérapeutes et de patients du monde entier, nous permet de créer des tables de massage parfaitement adaptées à la pratique de la physiothérapie. Les tables de massage Gymna constituent le choix préféré des thérapeutes du monde entier et sont disponibles dans plus de 100 pays.

Avec **gymna.GO**, notre gamme de tables de massage d'entrée de gamme, nous élargissons notre portefeuille de produits pour permettre à un plus grand nombre de thérapeutes d'accéder à la qualité Gymna.

***Basically**
perfect*



***Conçu pour être
performante***




La pureté des lignes et des formes

La base d'un bon design

Les lignes et les formes élémentaires pures, comme le cercle, le triangle ou le rectangle, constituent la base de tout bon design. L'utilisation efficace de ces lignes et de ces formes est à l'origine des proportions nettes et bien équilibrées de la table de massage **gymna.GO**. Tous les éléments essentiels ont été rassemblés pour créer une solution adaptée à votre pratique quotidienne et conforme aux critères de qualité qui font la réputation de Gymna.

*gymna.***GO**

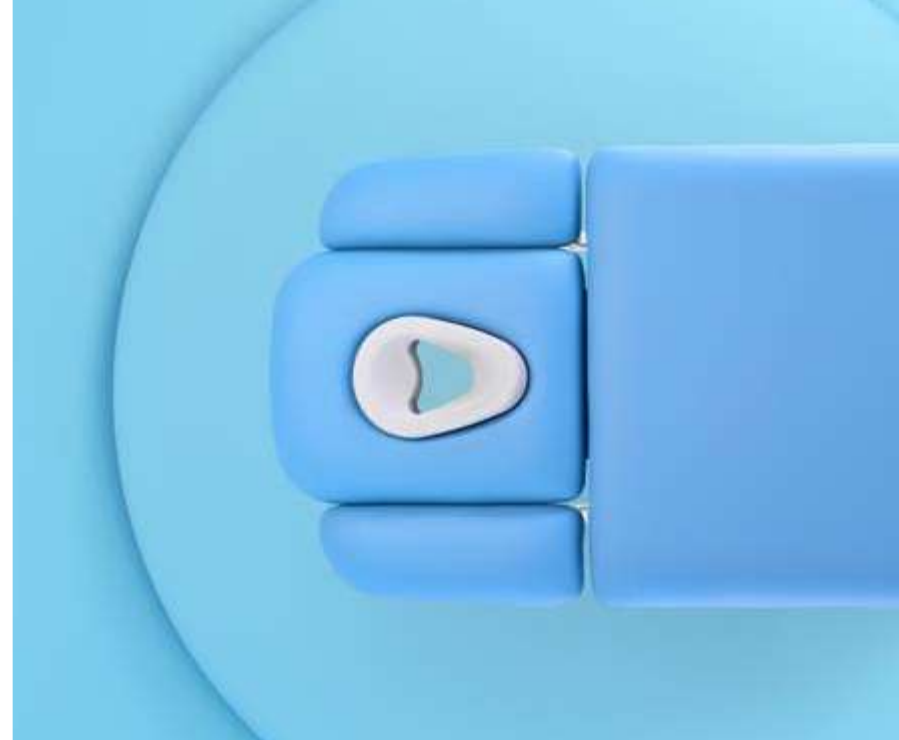



***“Parfaite
pour ma
pratique”***

La fonctionnalité est essentielle

La qualité avant tout

Que vous soyez débutant ou expert, l'achat d'une table de massage est le résultat d'un processus de décision réfléchi. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre fonctionnalité et qualité. **gymna.GO** offre tout simplement un support stable et solide pour vos patients, en position assise ou couchée. Le réglage fiable de la hauteur leur permet de s'installer confortablement et vous donne la possibilité de travailler à la bonne hauteur en évitant les accidents du travail. **gymna.GO** vous apporte ainsi tout ce que vous attendez d'une table de massage d'entrée de gamme.

*Quality in its
purest form*



Comprendre *les besoins*



Optimiser le traitement.

Using the right product characteristics

gymna.GO est réglable en hauteur et disponible en sept modèles différents avec plusieurs options et accessoires destinés à compléter la table en fonction de vos besoins. Que vous soyez à la recherche d'un système de réglage de hauteur électrique ou hydraulique, d'une table à 2 ou 3 plans, d'accoudoirs ou de dossiers réglables ou même d'une table de traction, l'un de nos modèles répondra sûrement à vos besoins. Profitez de l'option intelligente Gymna Ergomax, le support de tête ultra-hygiénique de forme ergonomique destiné à maintenir le patient en position naturelle.

Bien qu'elle ait été conçue pour répondre aux besoins des kinésithérapeutes, la table **gymna.GO** et ses accessoires, tels que les appui-jambes gynécologiques, les porte-rouleaux de papier et les roues, peut également servir de table d'examen.



Caractéristiques

La qualité sous sa forme la plus pure

Le réglage de la hauteur est essentiel pour installer vos patients et alléger votre charge de travail durant votre pratique quotidienne. C'est la raison pour laquelle la table **gymna.GO** est équipée d'une fonction standard de réglage de la hauteur. Ce réglage peut être effectué au moyen d'un puissant moteur électrique ou d'une pompe hydraulique à pied.

Pompe hydraulique

La pompe hydraulique permet de se passer totalement de l'électricité et d'utiliser la table **gymna.GO** à tout moment et en tout lieu.



Qualité vérifiée

Les tables de massage **gymna.GO** sont fabriquées en Belgique dans une usine qui a été primée. Cette « usine du futur » nous garantit une qualité et une durabilité constantes. Les cadres en acier sont soudés par des robots et recouverts d'une belle peinture en poudre semi-brillante qui leur assure une protection particulièrement résistante et durable. Les roulements sans entretien garantissent un mouvement silencieux et une facilité d'utilisation.



i-Control

Ce système intelligent actionné au pied assure un réglage facile, précis et sûr de la hauteur à partir de n'importe quel endroit autour de la table et s'avère particulièrement utile dans le cabinet de kinésithérapie. Ses deux modes de fonctionnement autorisent des réglages continus ou pulsés. Il est possible également de choisir une pédale de commande unique.



Tête et dossier réglables

La tête et le dossier sont soutenus par des ressorts à gaz de qualité supérieure qui autorisent un positionnement facile, sûr et confortable de vos patients.

Accoudoirs

En position abaissée, les accoudoirs procurent au patient un confort accru en détendant les muscles de son cou et de ses épaules lorsqu'il est allongé sur le ventre.



La touche finale

Complétez votre table avec des options et des accessoires comme le support de tête Ergomax caractéristique de Gymna, des roues, un interrupteur de sécurité, des porte-rouleaux de papier ou des appui-jambes gynécologiques. Et, mieux encore, vous avez la possibilité de choisir une couleur parfaitement adaptée à votre cabinet.



Commutateur de sécurité

La table **gymna.GO** peut être équipée d'un interrupteur de sécurité intégré destiné à désactiver le moteur pendant votre absence. Cela permet d'éviter toute utilisation non autorisée de la table. Cette fonction est fournie en standard avec le système i-Control.



Roues

Vous pouvez commander une table **gymna.GO** avec un jeu de quatre roues pivotantes. Cela facilite l'utilisation de la table à différents endroits et le nettoyage de votre cabinet.



Support de tête Ergomax

Le support de tête Ergomax est une exclusivité Gymna. Imperméable et lavable, il vous garantit une hygiène maximale et protège ainsi vos patients contre les germes. Sa forme ergonomique et ses surfaces douces et sans couture font d'Ergomax la solution idéale pour le traitement en position couchée. Il est également disponible avec une ouverture-visage traditionnelle dans le coussin.

Coussins

Les coussins **gymna.GO** sont recouverts de similicuir biocompatible et sans phtalates. Ils sont doux et naturels au toucher, faciles à nettoyer ou à désinfecter et ignifuges. La partie intérieure est constituée d'une couche unique de mousse polyéthylène résistante qui réagit linéairement à la pression et offre un confort maximal pour le soutien du patient.



Couleurs

La table gymna.GO est proposée dans un éventail de 15 couleurs allant du classique à l'intemporel en passant par des tons vifs et gais. Vous pouvez ainsi choisir votre couleur préférée dans notre gamme de garnissages classiques.

		
Anthracite	Navy	Grey
		
Coffee	Cashmere	Sahara
		
Titanium	Blue	Sky
		
Cherry	Violet	Apricot
		
Green	Pistachio	Pink

*Colours for illustration purposes only



Spécifications

Dimensions	206 x 67 cm
Poids	± 75 - 80 kg (en fonction du modèle)
Réglage de la hauteur	± 47 – 97 cm
Capacité de levage	200 kg max.
Tension de secteur	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz
Consommation électrique	Max. 2,0 A (en fonction du modèle)
Classe d'isolation	II
Classification du dispositif	I
Pièces appliquées	Type BF
Protection contre l'humidité	IP21
Utilisation du moteur	max. 2 minutes en marche / 18 minutes au repos
Conformité	IEC/EN 60601-1:2012 ed. 3.1 IEC/EN 60601-2: 2014 ed. 4.0 93/42/CEE WEEE RoHS2



Support de tête Ergomax

Niveau de confort et d'hygiène maximum

Doté d'une forme ergonomique adaptée à la position naturelle du patient et d'une large ouverture en forme de cœur qui n'entrave ni les yeux ni la bouche, le support de tête Ergomax est doux et sans couture ; sa large surface permet de répartir la pression exercée sur le visage et de l'absorber au niveau du front et du menton.

Le support de tête Ergomax présente, de part et d'autre, un renforcement qui peut être large ou étroit en fonction de la forme du visage du patient.

L'hygiène est une priorité absolue dans tout cabinet. Le support de tête Ergomax s'enlève très facilement de la table. Sa mousse faible densité est imperméable, lavable et résistante aux produits désinfectants couramment utilisés dans les cabinets. Le patient peut ainsi se coucher en toute confiance sur une table fraîche et hygiénique.



Configuration



Configuration gymna.GO	D1	D1e	D2	D4	T3x	T5x	Traction
------------------------	----	-----	----	----	-----	-----	----------

Réglage de la hauteur

Électrique avec i-Control	●	●	●	●	●	●	●
Électrique avec commande au pied	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulique avec pompe à pied	●	●	●	●	●	●	●

Configuration standard

Finition de coussin linéaire	●	●	●	●	●	●	●
Garnissage classique, 15 couleurs	●	●	●	●	●	●	●
Largeur 67 cm	●	●	●	●	●	●	●
Tête réglable (haut et bas)			●	●	●	●	
Accoudoirs réglables				●		●	
Dossier réglable (haut)	●				●	●	●
Dossier réglable (haut et bas)		●					
Coussin coulissant pour la traction							●

Options et accessoires

Commutateur de sécurité pour la commande au pied ou à la main	○	○	○	○	○	○	○
Ouverture-visage	○	○	○	●	○	●	○
Ouverture-visage Ergomax	○	○	○	○	○	○	○
Roues	○	○	○	○	○	○	○
Appui-jambes gynécologiques	○	○	○	○	○	○	
Commande manuelle*	○	○	○	○	○	○	○
Porte-rouleau de papier de 50 cm / 60 cm	○	○	○	○	○	○	○
Traction							○

● Fonctionnalité standard

○ Fonctionnalité optionnelle

* En combinaison avec i-Control ou en remplacement de la commande au pied

*Basically
perfect*



gymna.GO

Quality in its purest form



Cryotherapy



Tecar - Diathermy



Shockwave Therapy



Physio Care



Electrolysis




Electrotherapy



Active Motion



Your dealer



gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510